



Allplex™ RV Master Assay

**O único tubo que você precisa
para conviver com a COVID-19**


Allplex™ RV Master Assay

Marcacã
CE-IVD


Teste de um tubo para 19 vírus respiratórios

Allplex™ RV Master Assay é a solução abrangente de testes respiratórios da Seegene.

A identificação precisa e rápida dos principais vírus respiratórios (gripe A, gripe B, VSR, MPV, AdV, RVH, VPI e SARS-CoV-2) permite atendimento atencioso ao paciente e gerenciamento eficaz de infecções.

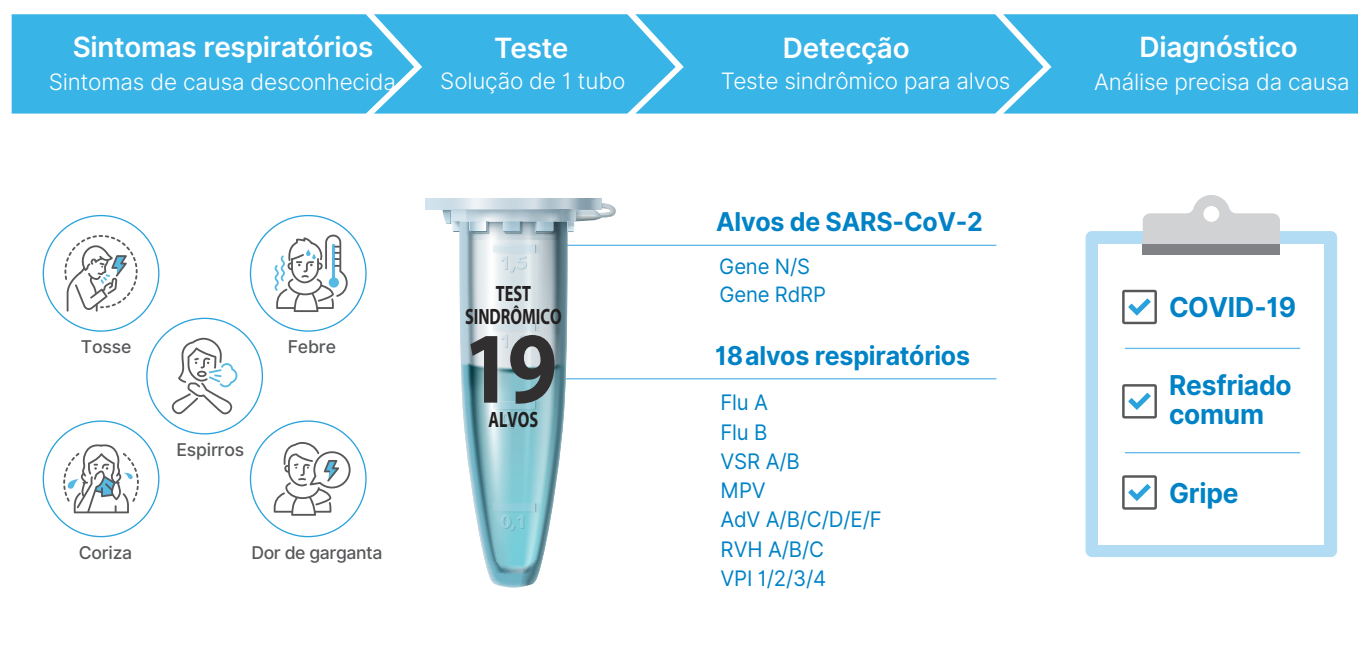


Um sistema automatizado simplificado

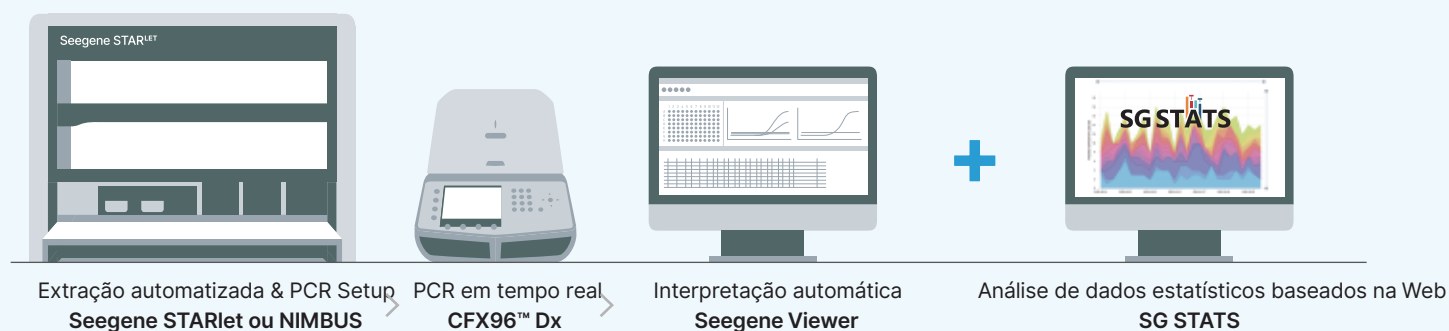

Teste abrangente de vírus respiratório para o Novo Normal

Uma infecção respiratória viral é uma das doenças mais comuns em todo o mundo que afeta pessoas de todas as idades diferentes gravidades. Apresenta sintomas semelhantes, mas o prognóstico é diferente pelos vírus causadores, portanto, o diagnóstico exato e tratamento adequado são cruciais para prevenir complicações graves.

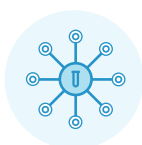

Teste sindrômico para vírus respiratórios

- Teste de 19 vírus respiratórios em um tubo com a tecnologia high-multiplex da Seegene



Testagem em massa

- Alto rendimento adequado para testes em larga escala
- 94 resultados de amostras em 3 horas em um único lote e até 1.316 amostras podem ser testadas em 12 horas



Eficiência maxim

- Fornece eficiência de teste maximizada por meio do sistema de automação completo da Seegene (AIOS) e garante segurança e conveniência ao usuário

Um tubo de teste para 19 vírus respiratórios

* EM BREVE

Analitos	Espécimes	Instrumentação compatível (CE-IVD Marked)	
SARS-CoV-2 (genes N/S, gene RdRP) Vírus Influenza A (Flu A) Vírus Influenza B (Flu B) Vírus Sincicial Respiratório humano A/B (VSR) Metapneumovírus humano (MPV) Adenovírus humano A/B/C/D/E/F (AdV) Rhinovírus humano A/B/C (RVH) Vírus Parainfluenza 1/2/3/4 (VPI) Controle Interno Exógeno (CI)	Aspirado nasofaríngeo Esfregaço nasofaríngeo Lavado broncoalveolar	Extração automatizada & PCR Setup Seegene NIMBUS Seegene STARlet Seegene AIOS	
		Extração automatizada NucliSENS® easyMAG® SEEPREP32™ Maelstrom™ 9600 MagNA Pure 96 KingFisher™ Flex	Real-time PCR CFX96™ Dx

Dê um upgrade no seu PCR em tempo real!

Com as principais tecnologias e know-how próprio da Seegene, aprimore seus produtos MDx com desempenho e usabilidade incomparáveis.

Desenho de oligos

Tecnologia para desenho de oligos para PCR multiplex:
SG-Insilic[®]



Permite o design rápido de oligos multiplex usando algoritmos desenvolvidos pela Seegene e variáveis confidenciais

Amplificação

Tecnologia de amplificação altamente específica para PCR multiplex: DPO[™]



Permite a implementação de diagnósticos multiplex com especificidade inigualável usando a estrutura de primer exclusiva da Seegene

Detecção de alvos

Tecnologia multiplex de alta complexidade para detecção de alvos: TOCE[™]



Alcança sinais de alvos precisos controlando independentemente sinais de múltiplos alvos por temperaturas de anelamento de iniciadores e sondas

Detecção quantitativa

Tecnologia multiplex de alta complexidade para detecção e quantificação de alvos: MuDT[™]



Amplia a capacidade de detecção e quantificação de alvo multiplex, permitindo a análise de vários valores de Ct em um único canal de detecção

Interpretação

Tecnologia de processamento de sinal multiplex de alta complexidade: DSP[™]



Permite relatórios precisos dos resultados positivos ou negativos do alvo por meio dos algoritmos de processamento de sinal proprietários da Seegene

Informação para pedidos

Produto
Allplex[™] RV Master Assay

Apresentação Cat. No.
100 rxns RV10307X
25 rxns RV10363Z

Instrumentos
CFX96[™] Dx (2 módulos)
Seegene NIMBUS
Seegene STARlet
Seegene AIOS^{**}
SEEPREP32[™]
Maelstrom[™] 9600
STARMag 96 X 4 Universal Cartridge kit*
STARMag 96 x 4 Viral DNA/RNA 200 C kit*
STARMag 96 ProPrep^{**}

STARMag 96 ProPrep C^{**}

TANBEAD[®] Nucleic Acid Extraction kit^{***}
OptiPure Viral Auto Tube
OptiPure Viral Auto Plate
OptiPure Viral Bulk Plate

Cat. No.
1845097-IVD & 1841000-IVD
65415-03
67930-03
SG72100
SG71100
M9600
744300.4.UC384
EX00013C
EX00009P
EX00009T
EX00017P
EX00017T

W665S66
W665A46
W665A10

* Para uso com Seegene NIMBUS e Seegene STARlet apenas,
** Para uso com SEEPREP32[™], *** Para uso com Maelstrom[™] 9600,
****EM BREVE

www.seegene.com

Seegene Inc.
Seoul, Republic of Korea
Tel : +82-2-2240-4000
E-mail : info@seegene.com

Brasil
Belo Horizonte, Brasil
Tel : +55-31-25153003
E-mail : contato@seegenebrazil.com.br

Colômbia
Bogotá D.C, Colombia
Tel : +57-315-7920200
E-mail : jlrodriguez@seegene.com

México
México city, México
Tel : +52-55-8848-9646
E-mail : mexico@seegene.com

Oriente Médio
Dubai, UAE
Tel : +971-4-558-7110
E-mail : sgme@seegene.com

Canadá
Toronto, Canada
Tel : +1-800-964-5680
E-mail : canada@seegene.com

Alemanha
Düsseldorf, Germany
Tel : +49-211-83831-600
E-mail : sgg@seegene.com

Itália
Genova GE, Italy
Tel : +39-010-667-1796
E-mail : info@arrowdiagnostics.it

EUA
California, USA
Tel : +1-925-448-8172
E-mail : info@seegenetech.com

